


薄型ウレタンフォームマットレス

アイリス 2

取扱説明書

上敷タイプ

必ずベッドマットレスの上に敷いてご使用ください。

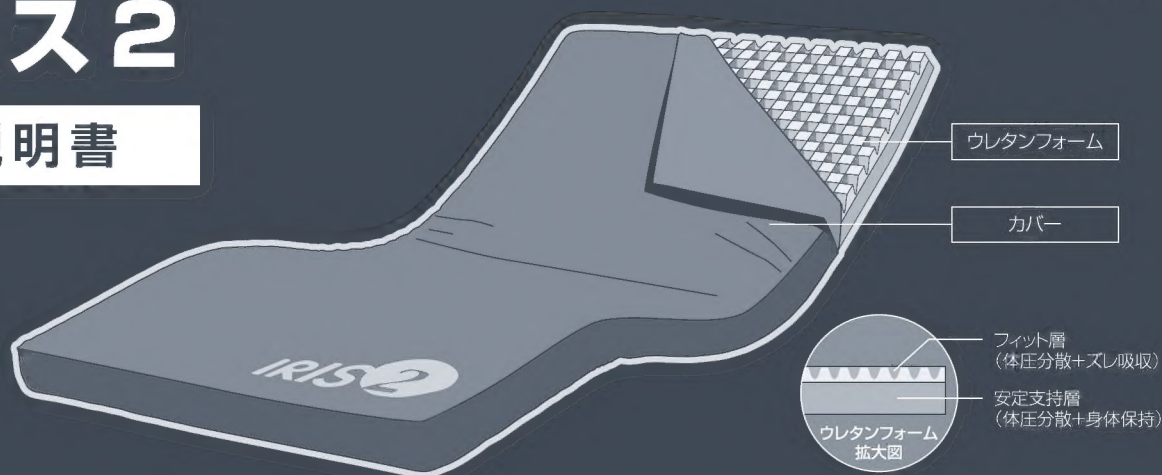

アイリス 2 は、
リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ（褥瘡）防止に適した、安定感のある薄型ウレタンフォームマットレスです。
独自の 2 層構造による優れた体圧分散効果とともに、凹凸のカットが局部的に加わるズレを軽減します。

安全にお使いいただくために

ウレタンフォームマットレスの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

ウレタンフォームマットレスのご使用中に生じる可能性のある災害を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを
予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。
従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



警告： このマークに従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。
特に重要なため、下記「警告 1」、「警告 2」にまとめて記載します。



1 ウレタンフォームマットレスは身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。
従って、心臓マッサージ等、硬い床などの上でないと効果がでない処置が予想されるような方へのご使用はお控えください。



2 ウレタンフォームマットレスのご使用に際しては、必ず医師や看護師などの専門家と相談の上ご使用ください。
またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。
病状悪化や事故の恐れがあります。

使用上のご注意

- ご使用になる前に、マット上面に異物がないかご確認ください。
異物があるままでご使用になるとケガをしたり、事故の原因になる場合があります。
- ロゴのプリントがある方を上にして、必ずマットレス等を下に敷いてご使用ください。
- 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください。
- 突起物のある場所にマットレスを敷いて使用しないでください。
- ストープなどの火に近づけないでください。
- 上に厚手のパッド等を敷かないでください。マットの効果が薄れる場合があります。
- ウレタンフォームに「へたり」や「破れ」が見られた場合は、交換をお願いいたします。

お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥についてはお問い合わせください。

■カバー

- ① 汚物（汚れ、便、血液等）を取除いてください。
- ② 水または、中性洗剤を水で薄めたものでマットレスの表面を拭いてください。
消毒用アルコールによる清拭も可能です。
※汚れがひどい場合は③の洗浄方法をご参照ください。※消毒液、ガスをご使用の場合は④の推奨消毒方法をご参照ください。
- ③ 洗浄方法



- ・水温は30℃を限度とし、弱い手洗い。
- ・塩素系漂白剤はご使用しないでください。
- ・ドライクリーニングができますが、溶剤は石油系のみ使用できます。
- ・アイロンは使用しないでください。
- ・手絞りは避けてください。
- ・日陰で吊り干ししてください。



専用カバーの洗濯機による洗濯は避けてください。
防水性が高いため水が抜けず、
洗濯機転倒等の危険性があります。



- ・ドライクリーニング（石油系は除く）、乾燥機、オートクレープは、表面のポリウレタン樹脂を痛めますので使用しないでください。
- ・タンブラーでの乾燥はフィルムが剥がれたり、破れたりする恐れがありますので避けてください。
- ・アイロン、スチームプレスは絶対に避けてください。

④ 推奨消毒方法

- ・消毒用エタノール
- ・次亜塩素酸ナトリウム 400ppm 以下
- ・塩化ベンザルコニウム 0.1% 以下
- ・塩化ベンゼトニウム 0.5% 以下
- ・ヒビテン 0.5% 以下
- ・IGB 液（イソプロピルアルコール、グルタルアルデヒド、緩衝剤）
- ・オゾンガス 0.5 ppm 以下
- ・ホルマリンガス
- ・エチレンオキシドガス



- ・クロロホルム
- ・クレゾール
- ・シンナー
- ・ベンジン

■ウレタンフォーム

洗浄、消毒に対応していません。カバーを外し、数時間の日陰干しを推奨致します。

※日光の当たり方などにより、ウレタンの色が多少変色してくる場合がありますが、機能的には問題ありません。

保管方法について

- ・圧縮された状態での保管は避けてください。亀裂やヘタリの原因となります。
- ・上に重いものを置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所は避けてください。

仕様

タイプ／品番	標準／CR-277	ワイド／CR-278
寸法 (cm)	83×191×7.5	90×191×7.5
重量 (kg)	4.4	4.7
素材	カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（制菌・防水）、底面／ナイロン（すべり止め加工） 中身：ウレタンフォーム（抗菌・難燃）	